

ANIOXY-TWIN

CONCENTRE

CE
0459

Désinfectant de
Haut Niveau



- 1 seul temps de contact : 15 minutes (Bactéricide, fongicide, virucide, mycobactéricide, sporicide)
- Actif immédiatement après dilution dans l'eau
- Sur base acide peracétique stabilisé
- Formulé sans aldéhyde : pas de fixation de protéines
- Produit concentré sans activation
- Sécurité : 2 flacons Twin évitant tout risque d'erreur lors de la préparation
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette.
- Référence dans la Liste positive S.F.H.H.

INDICATIONS

Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

CARACTERISTIQUES

- La solution désinfectante contient de 1200 ppm d'APA (après reconstitution) à 900 ppm (concentration limite détectée par les bandelettes).
- Agents anti-corrosifs actifs à pH acide.
- Faible concentration en peroxyde d'hydrogène : limitation des vapeurs de peroxyde d'hydrogène (meilleure tolérance pour l'utilisateur).
- Large compatibilité avec matériaux, bacs et paillasses.
- Produit concentré à diluer dans tout type d'eau (sauf eau adoucie).
- Stabilité du bain de trempage : 24 heures/20 endoscopes.
- Compatible avec tout type de produits nettoyant-pré-désinfectants à pH neutre.
- Eviter le mélange de métaux et alliages dans un même bain.
- Solution limpide de couleur jaune après reconstitution.
- pH : Environ 4,5

15
min.




PRÊT A L'EMPLOI
APRES RECONSTITUTION

ANIOXY-TWIN


CONCENTRE

Désinfectant de Haut Niveau



MODE D'EMPLOI

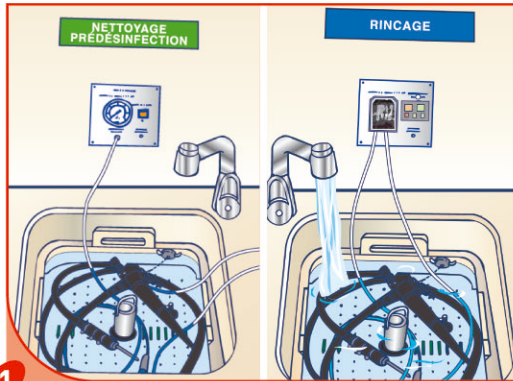

Etape de pré-désinfection :
Nettoyer le dispositif avec un produit type ANIOSYME DD1, ANIOSYME DLT PLUS, HEXANIOS G+R ou ANIOSYME PLA II.
Rincer soigneusement.

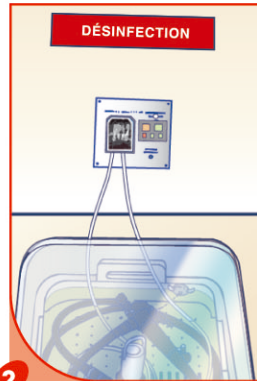

Etape de désinfection :
Verser le nombre de double-flacons nécessaire dans le bac de désinfection (1 double flacon pour 5 litres d'eau). Couvrir le bac.
Temps de contact : 15 minutes.
Pour le matériel endoscopique : faire circuler la solution à l'intérieur des canaux et écouvilloner.

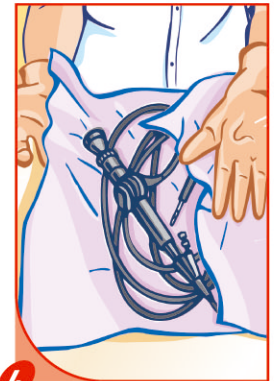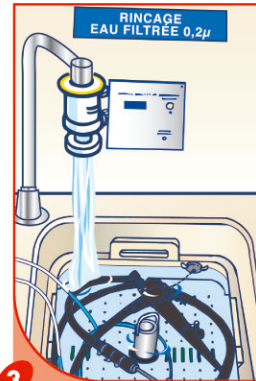

Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

COMPOSITION QUALITATIVE

La solution reconstituée ANIOXY-TWIN contient initialement 1200 ppm d'acide peracétique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage : de +5°C à +25°C.

CONDITIONNEMENTS

- 1 12 doubles-flacons.....Réf. 1343.408
- 2 Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique (boîte de 50).....Réf. 100.265

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, SARM (EN 13727) EN 1276, NF T 72-171	5 minutes
Mycobactéries	EN 14348, prEN 14563	10 minutes
Levures/ Moisissures	EN 1275, EN 13624 EN 1650	10 minutes
Virus	NF T 72-180 HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)	15 minutes 10 minutes
Spores de bactéries	NF T 72-230/231	15 minutes

